



PRESENTACIÓN
NURUGO™ Micro

STI CARD
WWW.STICARD.COM/NURUGO

ÍNDICE

CONTENIDOS

01

NURUGO MICRO
INTRODUCCIÓN

02

NURUGO MICRO
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

03

NURUGO MICRO
¿POR QUÉ?

04

NURUGO MICRO
GALERÍA DE IMÁGENES

05

NURUGO MICRO
ESTRUCTURA

06

NURUGO MICRO
TECNOLOGÍA

07

NURUGO MICRO
APP NURUGO BOX

08

NURUGO MICRO
PROCESO DE SUBIDA DE IMÁGENES EN NURUGO BOX

09

NURUGO MICRO
USOS Y APLICACIONES


10

NURUGO MICRO
CONTACTO



NURUGO MICRO

INTRODUCCIÓN

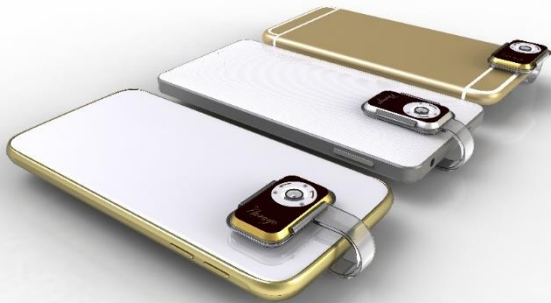

Nurugo micro es el microscopio digital más pequeño y ligero del Mundo, capaz de obtener imágenes de alta resolución de hasta 400 aumentos



NURUGO MICRO

DESCRIPCIÓN



EXPANDE TUS HORIZONTES, CAMBIA EL MUNDO. ¡DESCUBRIR EMPIEZA CON NURUGO MICRO!

NURUGO Micro es el microscopio de 400 aumentos para móviles más pequeño del mercado. Tan sólo tienes que añadir NURUGO Micro a tu smartphone y disfrutarás de un mundo nuevo, no sólo al alcance de investigadores y científicos o profesionales de la medicina.

NURUGO Micro es para todos: tu familia y amigos, estudiantes con inquietudes y niños curiosos. NURUGO Micro pone al alcance de cualquiera con un teléfono móvil, la posibilidad de capturar imágenes y vídeos en alta resolución del mundo microscópico desde la app gratuita NURUGO Box.



STI CARD
WWW.STICARD.COM/NURUGO



NURUGO MICRO


¿POR QUÉ?

Peso total incluyendo el clip 3,89 grs.	Compatibilidad 	Sin baterías 	Sin cables 
Aumentos dependiendo del smartphone 18-400x	Grosor extremadamente fino 0,5 cm.	Iluminación uniforme Tecnología de luz patentada (pendiente)	Compatible con iOS & Android 



HASTA 400 AUMENTOS

Gran tasa de aumento con alta resolución.

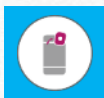

LA COMODIDAD DE UN DISPOSITIVO PORTÁTIL

Pequeño y ligero, cabe en tu bolsillo.



SENCILLO DE UTILIZAR

Simplemente ajústalo en teléfono y úsalo.



SIN BATERÍAS NI CABLES

Úsalo donde y cuando quieras.




STI CARD
WWW.STICARD.COM/NURUGO



NURUGO MICRO

GALERÍA DE IMÁGENES (Samsung galaxy s4)

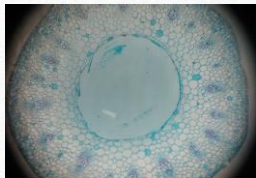


Sección de un tallo
18 x




Alga verde
18 x



Fragmento hidra
18 x

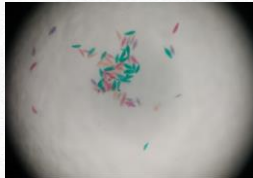


Paramecio
18 x

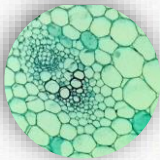


400 X



400 X

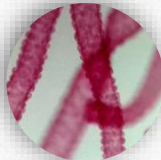

400 X

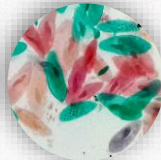

400 X




NURUGO MICRO

GALERÍA DE IMÁGENES (Samsung galaxy s4)



Pantalones vaqueros
18 x

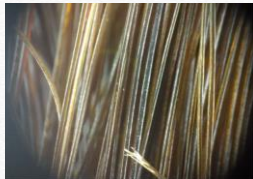

Cabellos
18 x




Pata de una abeja
18 x




Seguridad oculta DNI
18 x



400 X

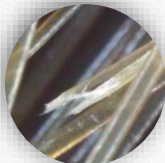

400 X

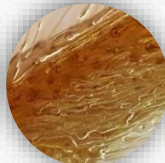

400 X



400 X




STI CARD
WWW.STICARD.COM/NURUGO



NURUGO MICRO

ESTRUCTURA

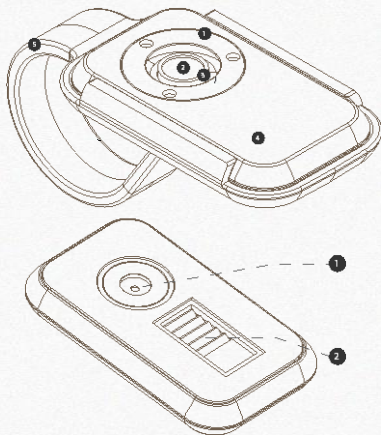

01 ANILLO DE FIJACIÓN
Gran tasa de aumento con alta resolución.

02 LENTE

03 GUÍA DE LUZ
Diseñada para minimizar la pérdida de luz.


04 CARCASA

05 CLIP DE SUJECCIÓN

01 CÁMARA
En contacto con la cámara del smartphone.


02 LED
Recibe la luz del flash del smartphone.



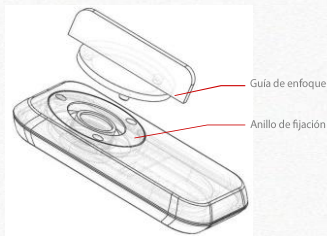

Anillo de fijación

El anillo de fijación está diseñado para iluminar de manera uniforme el objeto y puede emplearse con cualquier tipo de smartphone. La guía de enfoque se emplea para ajustar manualmente el enfoque sobre el objeto observado.

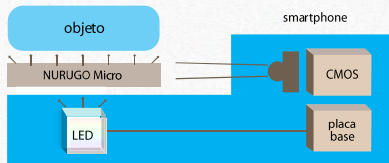

Guía de luz

La guía de luz está diseñada para utilizar el LED del smartphone como Fuente de luz. Está concebida para prevenir la pérdida de luz, produciendo imágenes de alta resolución.

NURUGO MICRO


APP NURUGO BOX



Desarrollada para obtener imágenes microscópicas de alta resolución comparadas con las que tomaría la propia cámara del smartphone. Permite publicar y compartir imágenes y vídeos, desde un punto de vista social, obtenidos con NURUGO Micro.



Desde la pantalla de captura de imágenes y videos se pueden tomar fotografías simples o en modo ráfaga, grabar videos, ajustar el zoom hasta 400 aumentos y también la luminosidad.

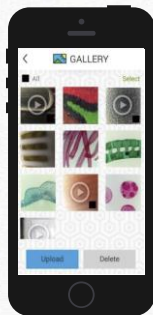

En esta pantalla de la aplicación se guardan todas las imágenes y vídeos capturados con NURUGO Micro. Todos los elementos multimedia están organizados por fecha de creación y permiten compartirlos de manera inmediata en NURUGO Box.



NURUGO Box sirve como plataforma para los usuarios de NURUGO para que puedan publicar y compartir los contenidos capturados con sus NURUGO Micro y Derma.



STI CARD
WWW.STICARD.COM/NURUGO



NURUGO MICRO


CÓMO SUBIR UNA IMAGEN EN NURUGO BOX

PROCESO DE SUBIDA DE IMÁGENES EN NURUGO BOX



NURUGO MICRO

USOS Y APLICACIONES

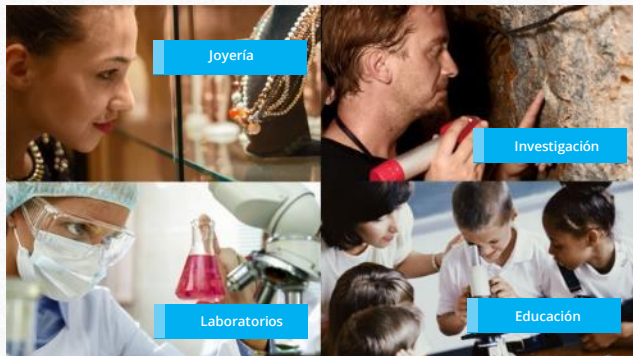

- Profesores y ámbito educativo.
- Estudiantes
- Investigadores
- Técnicos de laboratorio y comunidad científica.
- Joyería.
- Industria textil.

- Sector alimentario.
- Pequeño comercio.
- Cuerpos de Seguridad.
- Análisis documental.
- Peritos.
- Imprenta y artes gráficas.

Usos y aplicaciones

NURUGO Micro tiene múltiples aplicaciones en profesiones diversas donde los cambios son continuos y la precisión en la investigación de campo es un requisito indispensable. Con NURUGO Micro no se necesitan ajustes complejos y de manera instantánea se pueden capturar imágenes para presentar en un informe o incluso pueden grabarse videos para compartir con un colega a través de e-mail o mensajería instantánea. Este ahorro de tiempo contribuirá a cambiar y mejorar la calidad de su investigación.

Además, NURUGO Micro puede usarse con cualquier Smartphone para verificar la calidad de un tejido, elementos de seguridad y micro textos en documentos oficiales como el DNI, un billete o pasaportes, investigar el medio natural y ¡mucho más!

Puede emplearse en investigación con carácter comercial y en la vida cotidiana.

En el ámbito educativo, los investigadores de laboratorio, profesores y otros docentes, así como los propios estudiantes, tienen al alcance de su propio teléfono móvil la posibilidad de emplear una herramienta sencilla y mucho más económica que los complejos y costosos equipos de laboratorio.

Compártalo con sus hijos y enséñeles a descubrir el maravilloso mundo microscópico con NURUGO Micro, su primer microscopio, a un precio muy asequible y con muchas funcionalidades que les encantarán.





NURUGO Micro está disponible para su venta tanto a cliente final como a empresas interesadas en su distribución comercial para los diferentes sectores de aplicación. Póngase en contacto con nosotros para conocer los términos y condiciones de compra de este producto.

NUESTRAS OFICINAS

c/ Medea 4, 2ºC – Edificio ECU.
28037 Madrid, España.



+34 91 323 44 74



+34 91 327 47 80



sticard@sticard.com



/página STI Card en Facebook



@sticard

